



Интеграция 3Shape и Invisalign



Требования

- Интраоральный сканер 3Shape TRIOS 3 / TRIOS 3 Basic
- Доктор должен быть сертифицирован Invisalign и иметь доступ к личному кабинету IDS
- Регистрация на портале 3Shape Communicate (<https://portal.3shapecommunicate.com/>)
 - Учетные данные (логин и пароль) должны быть также внесены в настройки программы TRIOS: *Еще – Настройки – Общие – Пользователи – Учетная запись 3Shape Communicate*

Сертификационный курс в онлайн Академии 3Shape

Необходимо зарегистрироваться и пройти сертификационный курс в онлайн Академии 3Shape, по результатам которого выдается шестизначный код для настройки соединения личных кабинетов 3Shape Communicate и Invisalign

- Зайдите на сайт 3Shape Academy <https://www.3shapeacademy.com/> и перейдите по ссылке в левом верхнем углу «Do you need to connect your TRIOS scanner to Invisalign, sign up [here](https://www.3shapeacademy.com/signup/learn/register)» или используйте прямую ссылку <https://www.3shapeacademy.com/signup/learn/register>
- Заполните регистрационную форму


The screenshot shows the 'Register' page with the heading 'Begin your new learning experience by simply filling out this form.' Below the heading is a progress bar with two steps: '1 User Profile' (active) and '2 Additional Fields'. The form fields for Step 1 are: Username (Email) (Required), Email (Required), First Name (Required), Last Name (Required), Password (Required) with a toggle icon, Retype Password (Required) with a toggle icon, Language (Required) with a dropdown arrow, and a link 'Already registered? Sign In'. A red 'NEXT' button is at the bottom right.

The screenshot shows the 'Register' page with the heading 'Begin your new learning experience by simply filling out this form.' Below the heading is a progress bar with two steps: '1 User Profile' (completed with a checkmark) and '2 Additional Fields' (active). The form fields for Step 2 are: Clinic/Practice name (Required), Job Title, Dongle number (Required), Country (Required) with a dropdown arrow, City (Required), and a link 'Already registered? Sign In'. At the bottom are red buttons for 'PREVIOUS' and 'REGISTER'.

* при заполнении регистрационной формы необходимо указать номер вашего лицензионного USB донгла. Эту информацию можно посмотреть в настройках программы TRIOS: *Еще – Настройки – Версии ПО и подписки – Управление подписками – USB-ключ*


Сертификационный курс в онлайн Академии 3Shape

- В течение 24 часов вы получите письмо с подтверждением вашей регистрации на курс
- Для прохождения курса вы можете перейти по ссылке в тексте письма 'TAKE THE COURSE NOW!' или зайти в свой личный кабинет на сайте Академии 3Shape <https://www.3shapeacademy.com/> , используя логин (адрес электронной почты) и пароль, указанные при регистрации

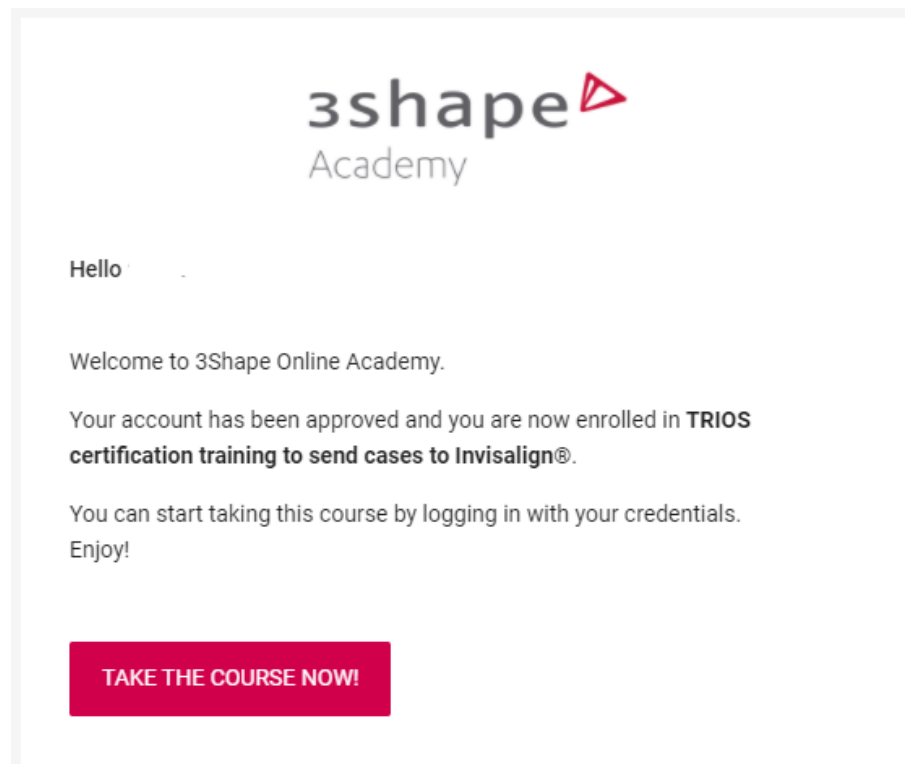

Сертификационный курс в онлайн Академии 3Shape

Курс состоит из 5 видеороликов общей продолжительностью 25 минут. После просмотра вам необходимо пройти тест из 10 вопросов. Тест считается успешно пройденным, если вы ответили правильно не менее чем на 80% вопросов. После успешного прохождения теста вы получаете шестизначный код, который потребуется для настройки интеграции личных кабинетов 3Shape Communicate и Invisalign.

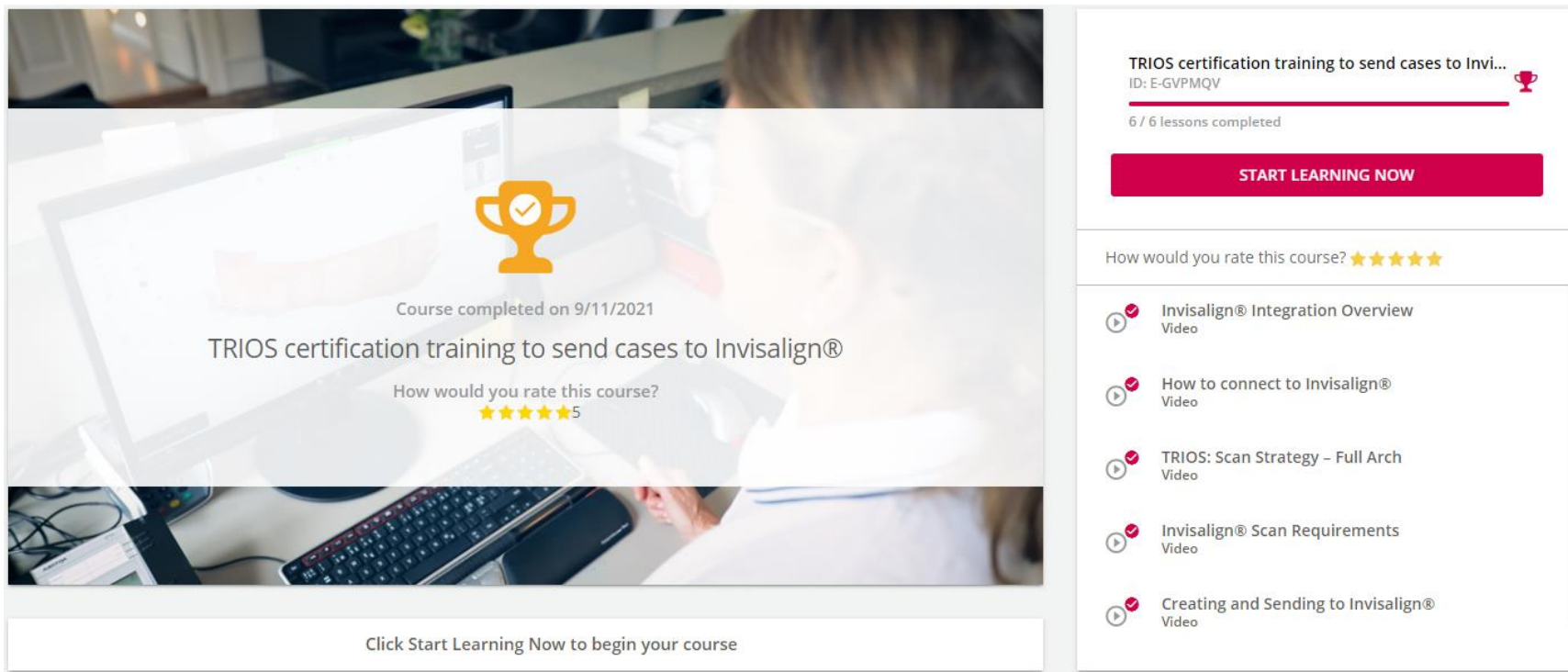

TRIOS certification training to send cases to Invisalign®
ID: E-GVPMQV

6 / 6 lessons completed

START LEARNING NOW


How would you rate this course? ★★★★★

- ▶ Invisalign® Integration Overview Video
- ▶ How to connect to Invisalign® Video
- ▶ TRIOS: Scan Strategy – Full Arch Video
- ▶ Invisalign® Scan Requirements Video
- ▶ Creating and Sending to Invisalign® Video

Click Start Learning Now to begin your course


Интеграция 3Shape Communicate и Invisalign

- Зайдите в личный кабинет 3Shape Communicate <https://portal.3shapecommunicate.com/>, используя свои учетные данные
- Перейдите на закладку **Integration**
- Для активации соединения с Invisalign нажмите кнопку **Enable Integration** в строке Invisalign (Align Technology, Inc)

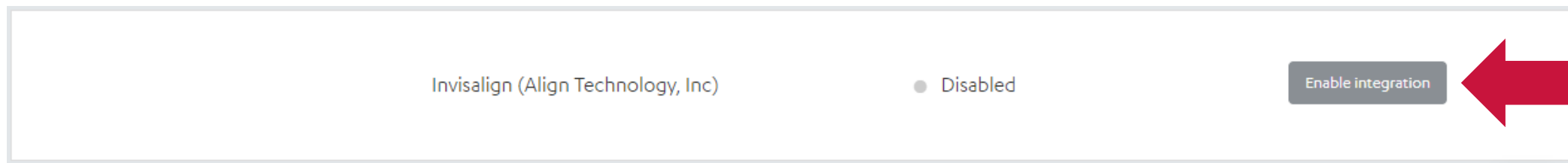

Invisalign (Align Technology, Inc)	● Disabled	Enable integration
------------------------------------	------------	--------------------

- Введите шестизначный код, полученный после прохождения курса онлайн Академии 3Shape, установите галочку и нажмите кнопку **Proceed**

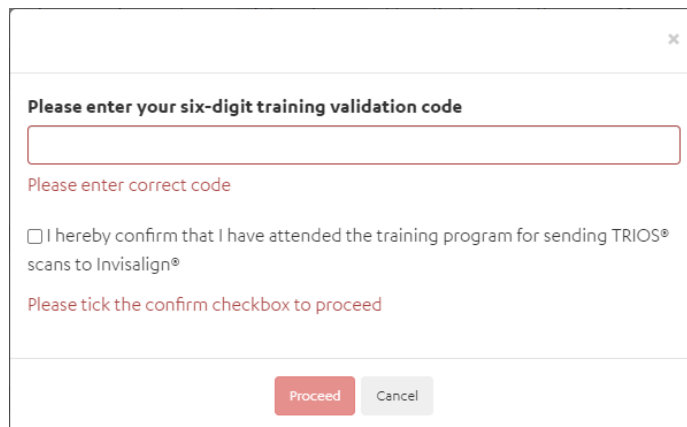

Please enter your six-digit training validation code

Please enter correct code


☐ I hereby confirm that I have attended the training program for sending TRIOS® scans to Invisalign®

Please tick the confirm checkbox to proceed

Proceed Cancel


Интеграция 3Shape Communicate и Invisalign

- Вы будете автоматически перенаправлены на Invisalign Doctor Site.
- Войдите в личный кабинет Invisalign, используя свои учетные данные

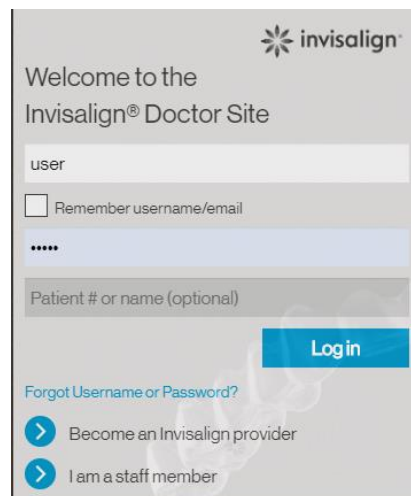


The screenshot shows the Invisalign Doctor Site login interface. At the top right is the Invisalign logo. Below it, the text reads "Welcome to the Invisalign® Doctor Site". There is a text input field containing "user", followed by a checkbox labeled "Remember username/email". Below that is a password field with masked characters "*****". A text input field for "Patient # or name (optional)" is also present. A blue "Login" button is positioned to the right of the patient field. At the bottom, there is a link "Forgot Username or Password?" and two links with right-pointing arrows: "Become an Invisalign provider" and "I am a staff member".

- Вы будете автоматически перенаправлены обратно в личный кабинет 3Shape Communicate и статус соединения с Invisalign изменится на **Enabled** (Включено)

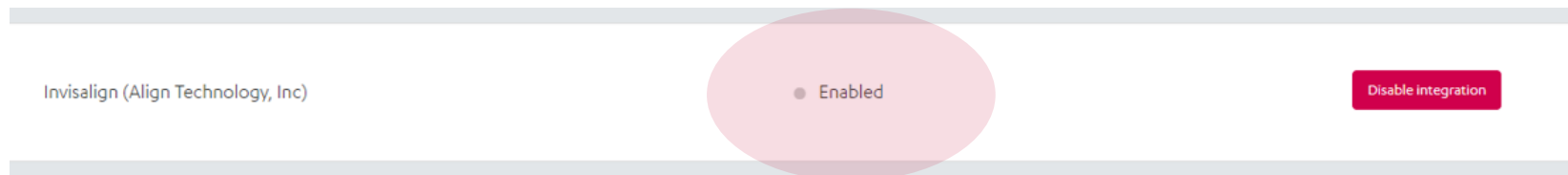


Интеграция 3Shape Communicate и Invisalign

- Чтобы убедиться, что интеграция прошла успешно, перейдите на закладку **Connections**. В списке подключений должна появиться лаборатория Invisalign

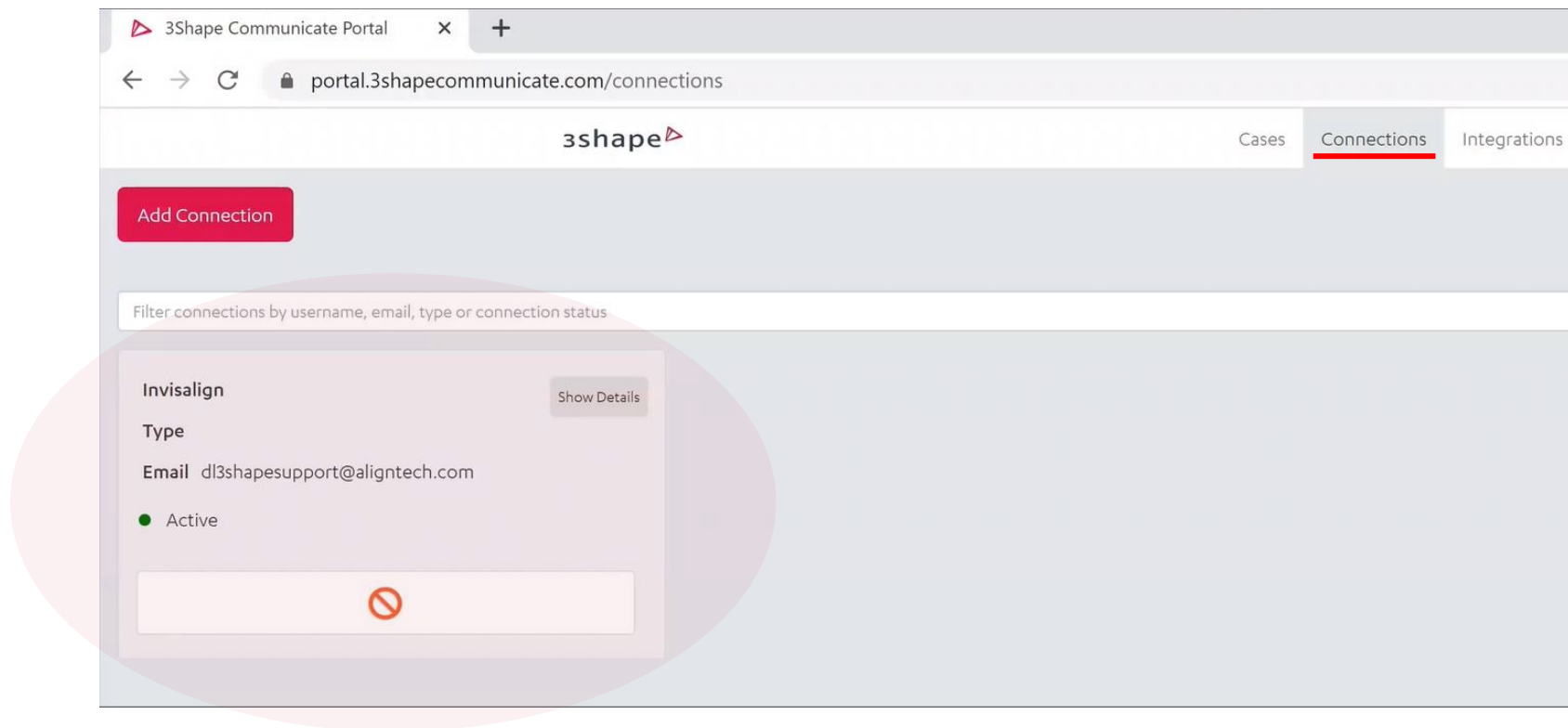

Настройка программы TRIOS

- Обратите внимание, что учетные данные (логин и пароль) вашей учетной записи 3Shape Communicate должны быть внесены в программу TRIOS: *Еще – Настройки – Общие – Пользователи – раздел «Учетная запись 3Shape Communicate»*
- Обновите список лабораторий в настройках программы TRIOS: *Еще – Настройки – Подключения – Лаборатории – кнопка «Обновить»*. Подключение Invisalign автоматически появится в списке избранных лабораторий

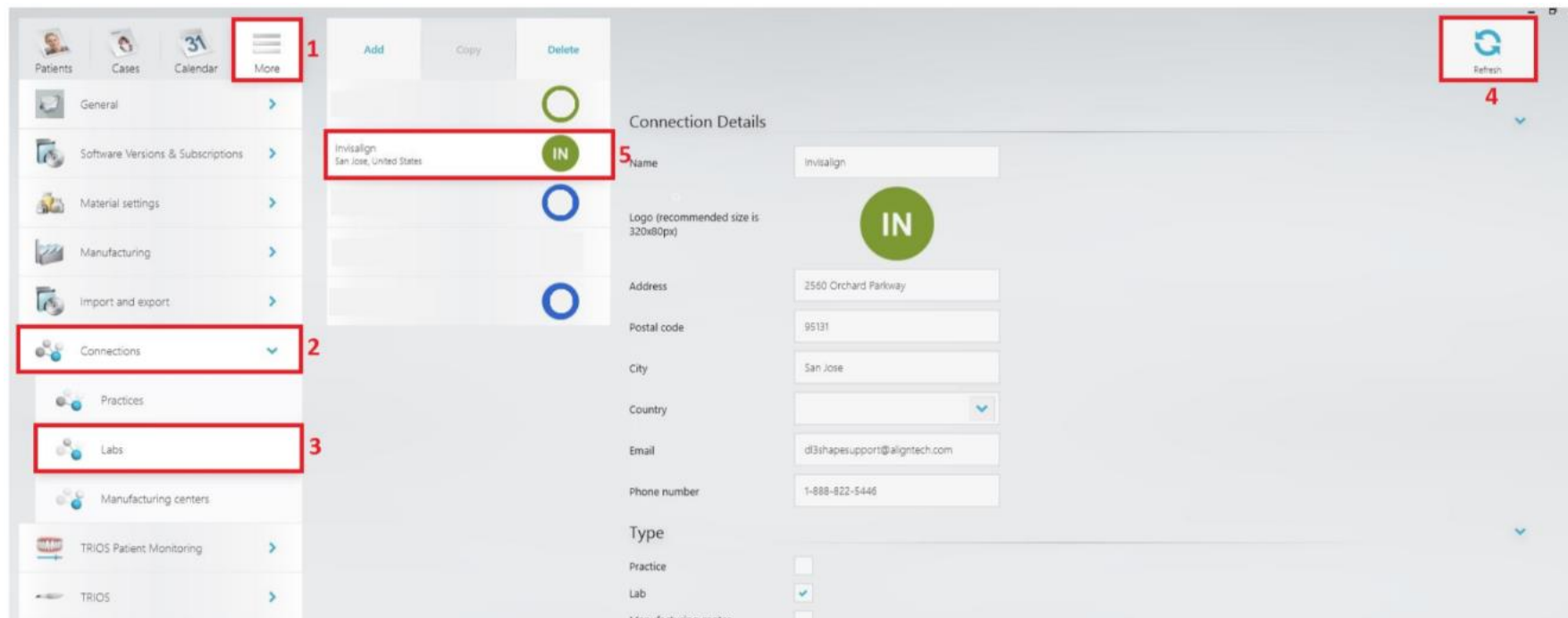


Работа в программе TRIOS. Оформление заказа

Обратите внимание на следующие важные моменты при оформлении заказа для Invisalign

В поле «Отправитель» необходимо выбрать Invisalign

Режим сканирования: «Только сканирование»



Имя и Фамилия пациента в карточке программы TRIOS и в заказе в личном кабинете Invisalign должны быть одинаковыми

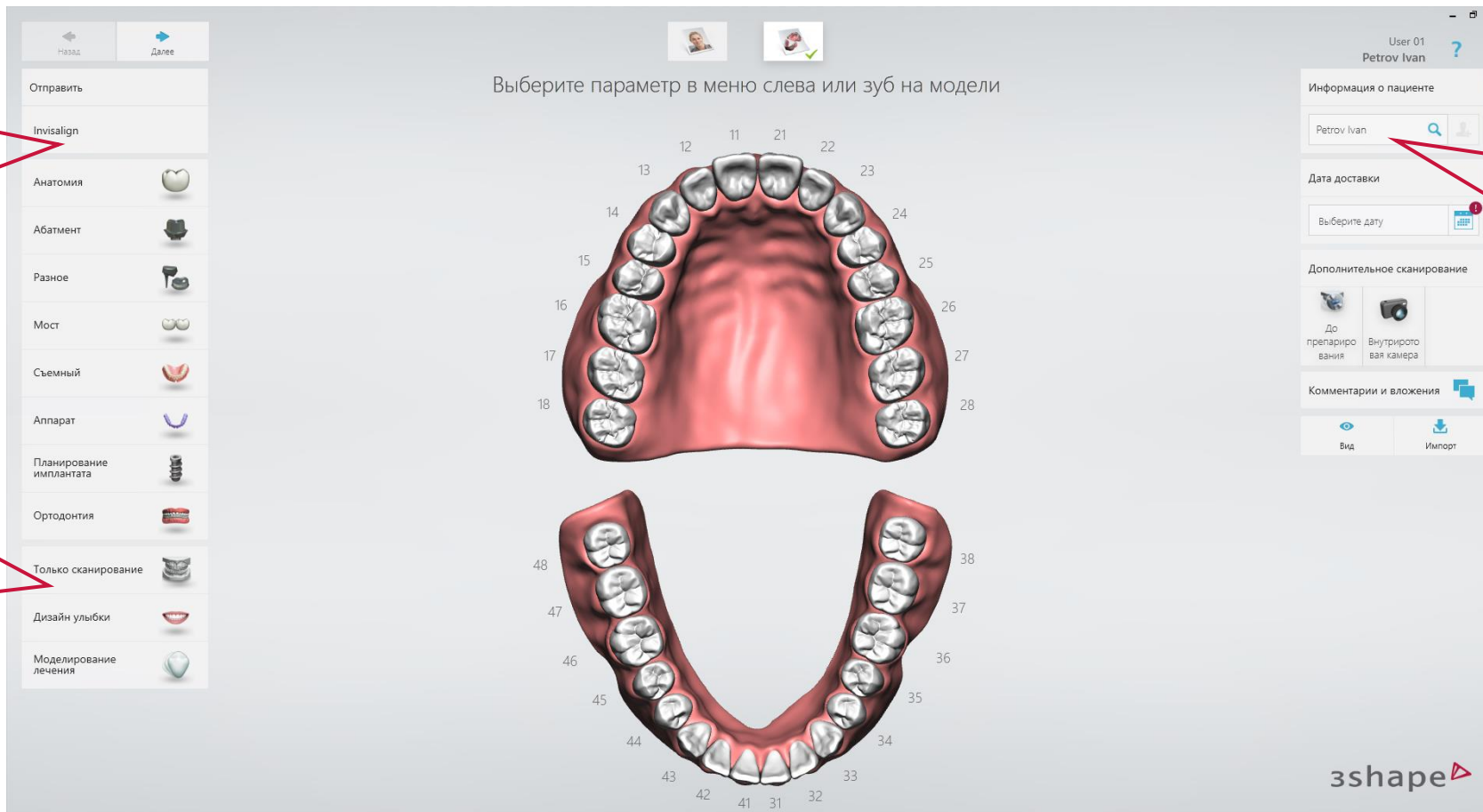

Работа в программе TRIOS. Сканирование

Рекомендации при сканировании для Invisalign

- Объем сканирования – нижняя челюсть, верхняя челюсти, прикус (!!!обязательное условие, даже если планируется изготовление элайнеров только для одной челюсти)
- Придерживаться рекомендованной стратегии сканирования полной дуги <https://youtu.be/UHStHdj7DI8>

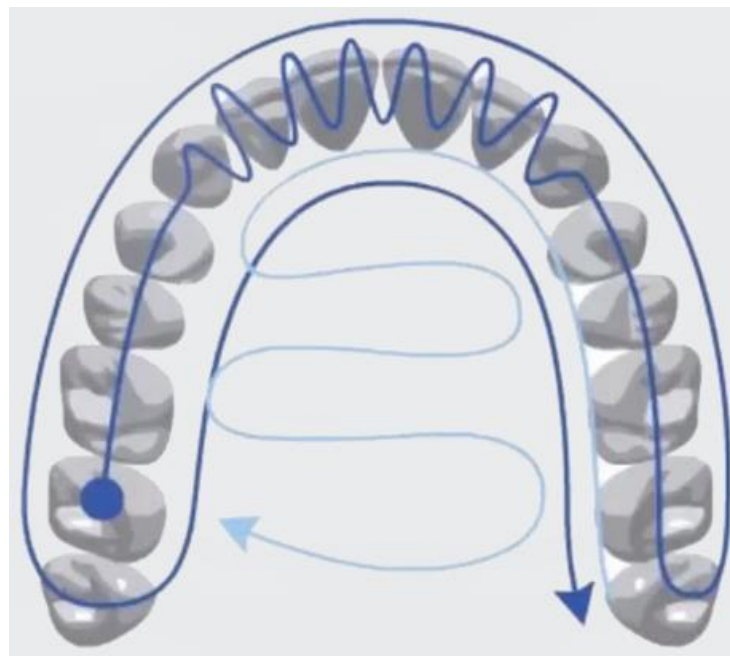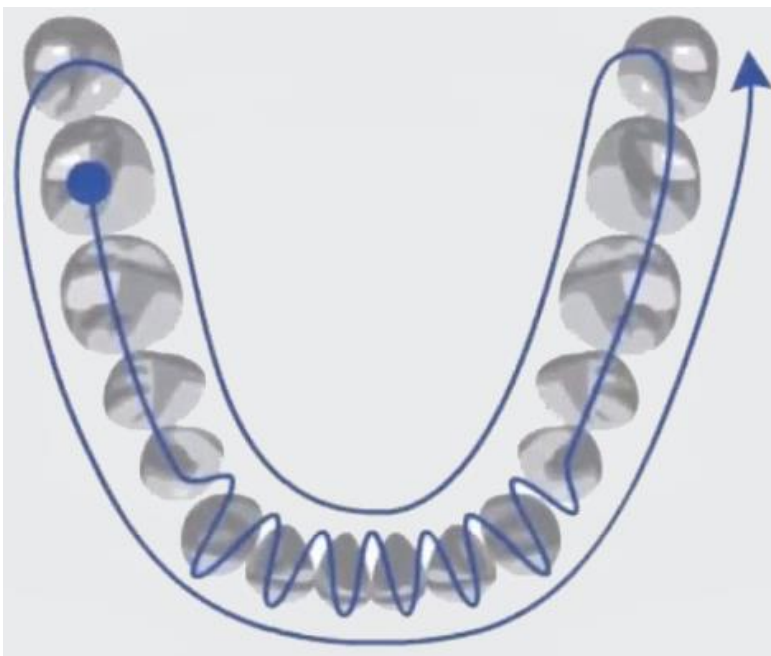

Работа в программе TRIOS. Сканирование

Рекомендации при сканировании для Invisalign



- Оклюзионная поверхность должна быть отсканирована в полном объеме, без каких-либо промежутков.



Работа в программе TRIOS. Сканирование

Рекомендации при сканировании для Invisalign


- Обратите внимание на качество сканирования следующих зон – режущий край, межзубные промежутки, интерпроксимальные участки. Эти зона должны быть отсканированы в полном объеме, без промежутков, без шумов, без «наложений» и «задвоений» поверхности.

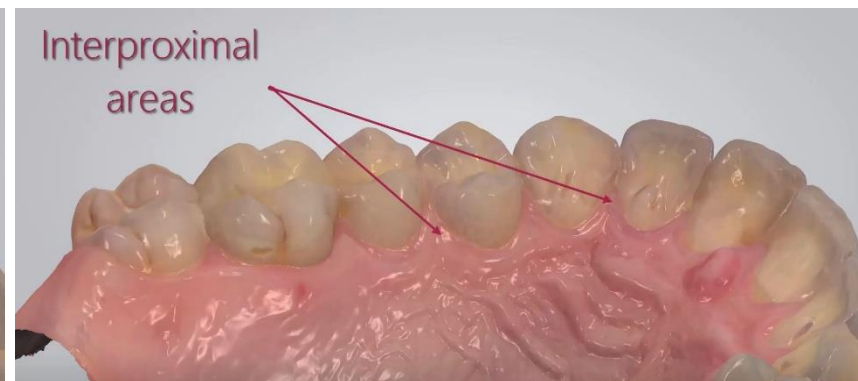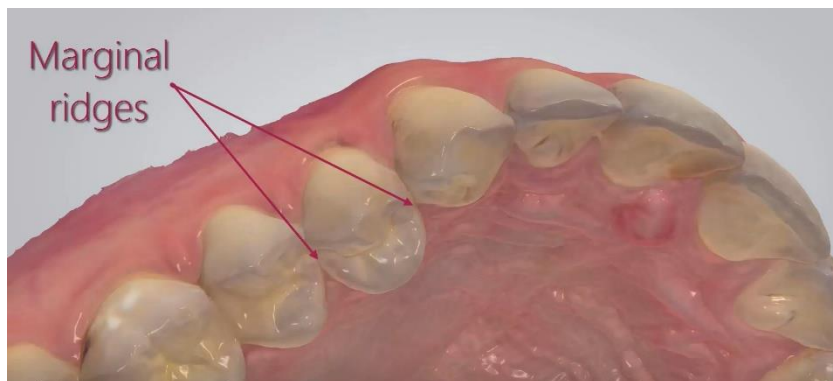

Работа в программе TRIOS. Сканирование

Рекомендации при сканировании для Invisalign


- Обратите внимание на качество сканирования десны. Десневой край должен быть четким. Объем сканирования десны – не менее 2 мм от десневого края.

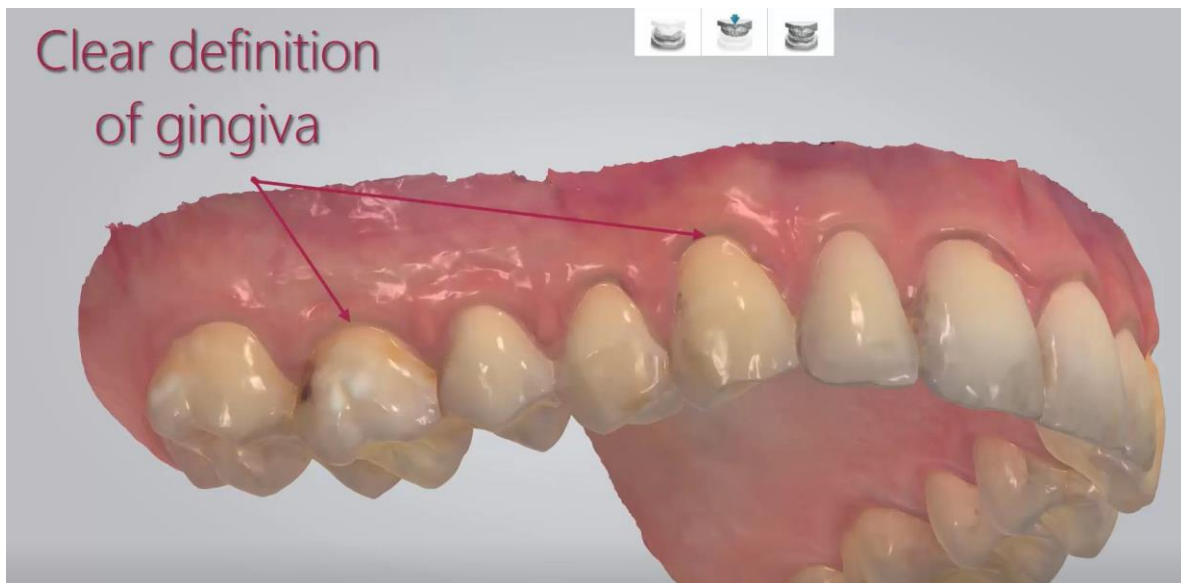

Работа в программе TRIOS. Сканирование

Рекомендации при сканировании для Invisalign

- Последние моляры желательно сканировать в полном объеме.
- Если последние моляры участвуют в лечении, полный объем сканирования без промежутков является обязательным условием!

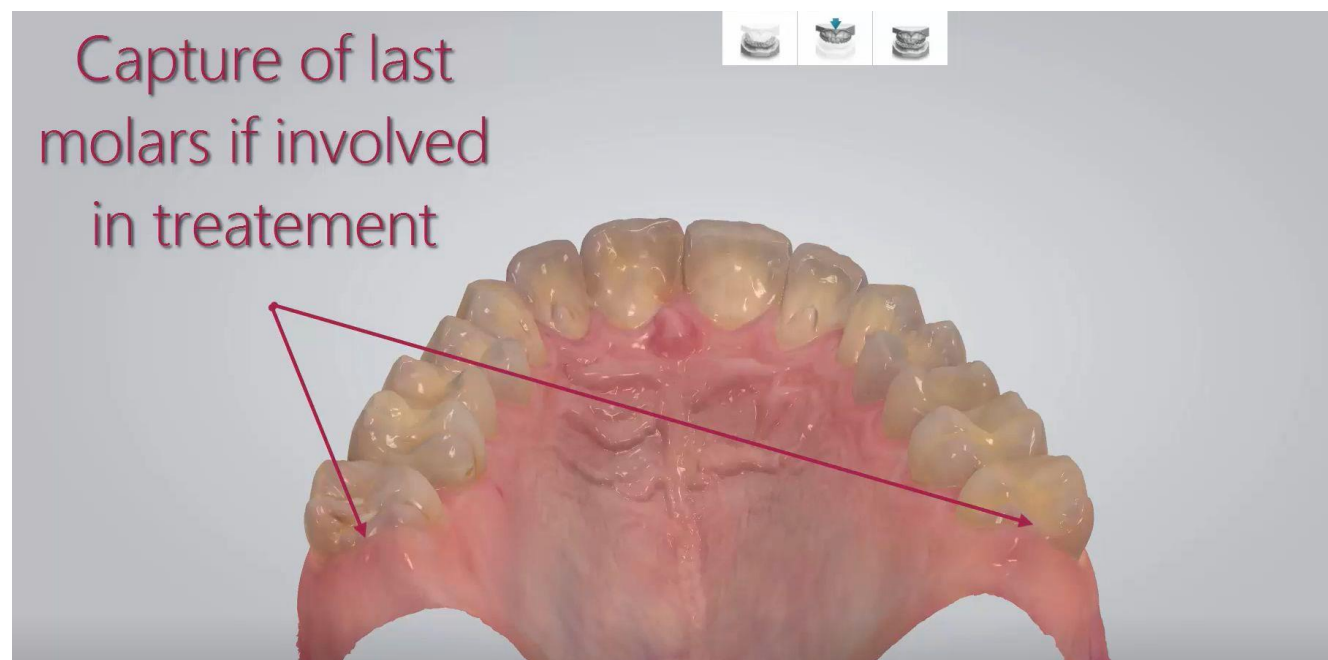

Let's change dentistry together